

# Surface Disinfectant Wipe

For the surface disinfection of non-invasive medical devices.  
Specially formulated for use in the Medical & Dental environment.



**Directions for use:** 1. Remove cap of dispenser tube, 2. Cut open air tight plastic pouch across the top of the pouch, 3. Feed the centre wipe through the hole in the cap and replace, 4. Pull wipe at a 45° angle. Using a new wipe for each application wipe objects to be disinfected so that they are completely moistened and let the disinfectant take action for a minimum of 60 seconds (to achieve full efficacy leave for 5 minutes). Allow surface moisture to evaporate. Do not use on surfaces sensitive to alcohol. For professional use only.

**Efficacy:** Bactericidal (60 secs), including MRSA, VRE. Yeasticidal (60 secs). Mycobactericidal (60 secs). Tuberculocidal (60 secs). Fungicidal (5 mins). Viruses to include (60 secs): Non-enveloped viruses: Murine norovirus, Adenovirus 5. Enveloped viruses: Hepatitis B virus (HBV), Hepatitis C virus (HCV), Hepatitis Delta virus (HDV), Human Immunodeficiency Virus (HIV), Influenza Virus (human, avian and porcine), Coronavirus, Herpesviridae, Filoviridae (Ebola), Rubella, Rabies, Measles.

**Tested to Standards:** EN 14885, EN 14476, EN 14348, EN 13727, EN 13624.

**Composition:** Ethanol, Aqua, Parfum, Linalool, Limonene.

**Danger:** H228: Flammable solid. H319: Causes serious eye irritation. H412: Harmful to aquatic life with long lasting effects. P210: Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. P403+P233: Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. P280: Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. P303+P361+P353: If ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water. P235: Keep cool. P305+P351+P338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P370+P378: In case of fire: Use alcohol resistant foam or carbon dioxide to extinguish.

**Peril:** P280: Use protective equipment. P303+P361+P353: If ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water. P235: Keep cool. P305+P351+P338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P370+P378: In case of fire: Use alcohol resistant foam or carbon dioxide to extinguish.



v1.0b 1908 LBL ---

## Efficacy

Microorganism	Time
<b>Bactericidal</b>	<b>60 sec</b>
Pseudomonas aeruginosa	60 sec
Staphylococcus aureus	60 sec
Enterococcus hirae	60 sec
E. Coli	60 sec
Salmonella typhimurium	60 sec
MRSA	60 sec
VRE	60 sec
<b>Fungicidal</b>	<b>5 min</b>
Aspergillus brasiliensis	5 min
<b>Yeasticidal</b>	<b>60 sec</b>
Candida albicans	60 sec
<b>Enveloped viruses</b>	<b>60 sec</b>
Hepatitis B virus (HBV)	60 sec
Hepatitis C virus (HCV)	60 sec
HIV	60 sec
Human T Cell Leukemia Virus	60 sec
Measles Virus	60 sec
Hepatitis Delta virus (HDV)	60 sec
Influenza Virus	60 sec
Coronavirus	60 sec
Herpesviridae	60 sec
Filoviridae (Ebola)	60 sec
Rubella Virus	60 sec
Rabies Virus	60 sec
Flavivirus	60 sec
Poxviridae	60 sec
<b>Non enveloped viruses</b>	<b>60 sec</b>
Adenovirus 5	60 sec
Murine norovirus	60 sec
<b>Mycobactericidal</b>	<b>60 sec</b>
Mycobacterium avium	60 sec
<b>Tuberculocidal</b>	<b>60 sec</b>
Mycobacterium terrae	60 sec

## FR

### Lingettes de désinfection humides

Ce liquide est spécialement conçu pour désinfecter les surfaces des dispositifs non invasifs. Spécialement formulé pour l'usage dans le milieu médical et dentaire.

**Mode d'emploi:** 1. Retirer le couvercle de la boîte distributrice. 2. Découper la partie supérieure du sachet en plastique hermétique. 3. Faire passer la lingette qui se trouve au centre à travers l'ouverture dans le couvercle et remettre ce dernier en place. 4. Tirer la lingette à un angle de 45°. Utiliser une nouvelle lingette pour chaque objet à désinfecter de manière à l'humidifier entièrement, puis laisser le désinfectant agir pendant 60 secondes (pour une efficacité totale, laisser agir 5 minutes). Laisser l'humidité superficielle s'évaporer. Ne pas utiliser sur les surfaces sensibles à l'alcool. Pour un usage professionnel exclusivement.

**Spectre effectif:** Bactéricide (60 sec) y compris contre SARV, ERV, Levuricida (60 sec), Mycobactéricide (60 sec), Tuberculocida (60 sec), Fungicide (5 min). Les virus non enveloppés (60 sec): le norovirus murin, l'adenovirus 5 et les virus enveloppés comprennent: le virus de l'hépatite B, le virus de l'hépatite C, le virus de l'hépatite Delta, V, le virus de la grippe (le virus de la grippe aviaire et porcine), Coronavirus, Herpesviridae, Filoviridae (Ebola), Rubéole, Rage, Rougeole.

**Testé aux normes:** EN 14885, EN 14476, EN 14348, EN 13727, EN 13624.

**Composition:** ethanol, aqua, parfum, linalool, limonene.

**Géprüft gemäß:** EN 14885, EN 14476, EN 14348, EN 13727, EN 13624.

**Zusammensetzung:** Ethanol, Wasser, Parfum, Linalool, Limonen.

**Gefahr:** H228: Entzündbarer Feststoff. H319: Verursacht schwere Augenreizung. H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten.

Nicht rauchen. P403+P233: Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P303+P361+P353: BEI CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau. P235: Tenir au frais. P305+351+338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime la porte et si elles peuvent être également contaminées. Continuer à rincer.

NON ENVELOPED VIRUSES: P305+351+338: BEI CONTACT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang mit Wasser waschen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P370+378: Bei Brand:

Aalkoholbeständiges Schaum oder Kohlenstoffdioxid zum Löschen verwenden.

## ES

### Toallitas desinfectantes

Indicado para la desinfección de la superficie de productos sanitarios no invasivos. Especialmente formulado para ambientes médicos y dentales.

**Aplicación:** 1. Quite la tapa del bote dispensador. 2. Corte la bolsa de plástico hermética por la parte superior; 3. Introduzca la toallita del centro a través del orificio de la tapa y coloque de nuevo la tapa. 4. Tire de la toallita en un ángulo de 45°. Utilice una toallita nueva para cada aplicación, frote los objetos a desinfectar hasta que estén completamente humedecidos. Deje que el desinfectante actúe durante al menos 60 segundos (para conseguir una eficacia total espere 5 minutos). Deje que la humedad de la superficie se evapore. No utilice el producto sobre superficies sensibles al alcohol. Solo para uso profesional.

**Efectivo:** Bactericida (60 sec), compreso SAMR, ERV, Lieviticida (60 sec). Tuberculocida e micobactericida (60 sec). Fungicida (5 min). Virus coperti (60 segundos); virus non capsulati: adenovirus, norovirus, virus capsulati: virus dell'epatite B, virus dell'epatite C, HIV, virus dell'influenza (i virus dell'influenza umana, aviaria e suina), virus dell'epatite B, virus dell'epatite C (VHC), virus della Hepatitis Delta (HDV), virus dell'herpès (Herpes virus), virus dell'herpès (Delta), virus dell'herpès (VHF), virus dell'herpès (EBOLA), virus dell'herpès (Rubella), virus dell'herpès (Sarampion).

**Prueba realizada para las normas:** EN 14885, EN 14476, EN 14348, EN 13727, EN 13624.

**Composición:** etanol, agua, perfume, linalool y limoneno.

**Peligro:** H228: Sólido inflamable. H319: Provoca grave irritación ocular. H412: Nocivo para los organismos acuáticos con efectos nocivos duraderos. P210: Mantener alejado del calor, fuego, chispas y superficies calientes- no fumar. P403+P233: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua. P235: Mantener en lugar fresco. P305+351+338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P370+378: En caso de incendio: Utilizar schiuma resistente al alcohol o anidrido carbonico para la extinción.



v1.0b 1908 LBL ---

## IT

### Salviette disinfettanti per superfici

Per la disinfezione di superfici di dispositivi medici non invasivi. Appositamente formulato per l'uso in Medicina e Odontoiatria.


**Applicazione:** 1. Togliere il coperchio del barattolo dispenser. 2. Aprire la busta ermetica tagliando l'estremità superiore. 3. Inserire la salvietta centrale nel foro del coperchio e riposizionarlo sul barattolo. 4. Estrarre la salvietta tirando a 45°. Usare una salvietta per ogni applicazione e strofinare gli oggetti da disinfettare in modo che siano completamente umidificati. Deje que el desinfectante actúe durante al menos 60 segundos (para conseguir una eficacia total espere 5 minutos). Deje que la humedad de la superficie se evapore. No utilice el producto sobre superficies sensibles al alcohol. Solo para uso profesional.

**Efectivo:** Bactericida (60 sec), compreso SAMR, ERV, Lieviticida (60 sec). Tuberculocida e micobactericida (60 sec). Fungicida (5 min). Virus coperti (60 segundos); virus non capsulati: adenovirus, norovirus, virus capsulati: virus dell'epatite B, virus dell'epatite C, HIV, virus dell'influenza (i virus dell'influenza umana, aviaria e suina), virus dell'epatite B, virus dell'epatite C (VHC), virus della Hepatitis Delta (HDV), virus dell'herpès (Herpes virus), virus dell'herpès (Delta), virus dell'herpès (VHF), virus dell'herpès (EBOLA), virus dell'herpès (Rubella), virus dell'herpès (Sarampion).

**Prueba realizada para las normas:** EN 14885, EN 14476, EN 14348, EN 13727, EN 13624.

**Composición:** etanol, agua, perfume, linalool, limoneno.

**Peligro:** H228: Peligroso para las personas acuáticas con efectos nocivos persistentes. P210: Mantener alejado del calor, fuego, chispas y superficies calientes- no fumar. P403+P233: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua. P235: Mantener en lugar fresco. P305+351+338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P370+378: En caso de incendio: Utilizar schiuma resistente al alcohol o anidrido carbonico para la extinción.

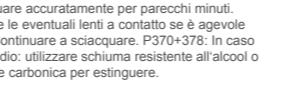

v1.0b 1908 LBL ---

## PL

### Chusteczki do dezynfekcji powierzchni

Do dezynfekcji powierzchniowej nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Przygotowany specjalnie do zastosowania w środowisku medycznym i stomatologicznym.

**Sposób użycia:** 1. Zdejmij pokrywkę z zasobnika. 2. Tąpią pungą ermetyczną plastikową przez otwór w pokrywie i ponownie założyć pokrywkę. 3. Przeprowadź górną chusteczkę przez serwetkę centralną pośrodku i skróć ją do 45°. 4. Tragę serwetki do góry i ustaw ją na chusteczkę. 5. Wyjmij chusteczkę pod kątem 45°. Używając nowej chusteczki do każdego elementu, przetrzeci obiekty do dezynfekcji w taki sposób, aby zostały zwilżone na całej powierzchni. Odczekaj co najmniej 60 sekund, aby środki dezynfekcyjne zadziałyły (do osiągnięcia pełnej skuteczności odczekać 5 minut). Odczekaj na odparowanie wilgoci z powierzchni. Nie używać na powierzchniach wrażliwych na alkohol. Tylko dla użytku profesjonalnego.

**Efektywny spektrum:** Bactericid (60 sec) include MRS, VRE, Lieviticida (60 sec); Tuberculocid i mycobactericid (60 sec); Fungicid (5 min). Virus som inkluderas (60 sek): Icke-höljesförseda virus: Adenovirus, norovirus, hörjförseda virus: Hepatitis B virus (HBV), Hepatitis C virus (HCV), HIV, influenzavirus (som inkluderar humana, fågel- och svin-influenzavirus), Hepatitis D virus, Coronavirus, filoviridae (Ebola-virus), rubella-virus, rubellavirus, maslinavirus, herpesviridae, rabiesvirus, poxviroidea.

**Test standartowy:** EN 14885, EN 14476, EN 14348, EN 13727, EN 13624.

**Skład:** etanol, woda, substancje zapachowe, linalol, limon.

**Pielęgnacja:** 1. Ostatkuj po użyciu. 2. Wysuszenie i przechowywanie. 3. Wysuszenie i przechowywanie. 4. Wysuszenie i przechowywanie. 5. Wysuszenie i przechowywanie. 6. Wysuszenie i przechowywanie. 7. Wysuszenie i przechowywanie. 8. Wysuszenie i przechowywanie. 9. Wysuszenie i przechowywanie. 10. Wysuszenie i przechowywanie. 11. Wysuszenie i przechowywanie. 12. Wysuszenie i przechowywanie. 13. Wysuszenie i przechowywanie. 14. Wysuszenie i przechowywanie. 15. Wysuszenie i przechowywanie. 16. Wysuszenie i przechowywanie. 17. Wysuszenie i przechowywanie. 18. Wysuszenie i przechowywanie. 19. Wysuszenie i przechowywanie. 20. Wysuszenie i przechowywanie. 21. Wysuszenie i przechowywanie. 22. Wysuszenie i przechowywanie. 23. Wysuszenie i przechowywanie. 24. Wysuszenie i przechowywanie. 25. Wysuszenie i przechowywanie. 26. Wysuszenie i przechowywanie. 27. Wysuszenie i przechowywanie. 28. Wysuszenie i przechowywanie. 29. Wysuszenie i przechowywanie. 30. Wysuszenie i przechowywanie. 31. Wysuszenie i przechowywanie. 32. Wysuszenie i przechowywanie. 33. Wysuszenie i przechowywanie. 34. Wysuszenie i przechowywanie. 35. Wysuszenie i przechowywanie. 36. Wysuszenie i przechowywanie. 37. Wysuszenie i przechowywanie. 38. Wysuszenie i przechowywanie. 39. Wysuszenie i przechowywanie. 40. Wysuszenie i przechowywanie. 41. Wysuszenie i przechowywanie. 42. Wysuszenie i przechowywanie. 43. Wysuszenie i przechowywanie. 44. Wysuszenie

**BG****Кърпички за дезинфекциране на повърхности**

За дезинфекция на повърхности на неинвазивни медицински изделия. Специална формула за употреба в медицинска и стоматологична среда.

**Инструкции за употреба:** 1. Свалете каланчата (само на потребителската Кутия). 2. Отрежете херметичния пайлон плък в горната част. 3. Прокарайте кърпичката през централния отвор на каланча и поставете обратно каланчата. 4. Използвайте кърпичката под ѝгъл от 45°. Използвайте нова кърпичка за всяко приложение, избръшете подлежащите на дезинфекция предмети така, че да са навлажнени изцяло, и осъществете дезинфектанта да действа в продължение на минимум 60 секунди, докато благата от повърхността се изпарят (за постигане на цялостна ефикасност оставете за 5 минути). Да не се използва върху повърхности, чувствителни към алкохол. Само за професионална употреба.

**Спектър на действие:** Бактерицидно (60 с.), включително MRSA, VRE, Yeasticid (60 с.). Туберкулоидно и микобактерицидно (60 с.). Фунгицидно (5 мин.). Спектър на действие (60 с.): Вируси без обвивка: аденоовирус, norovirus. Вируси с обвивка: вирус на хепатит C (HCV), вирус на хепатит C (HCV), човешки монодифицитен вирус (HIV), пренесен вирус (които включва новечки, птичи и свински грипни вируси), хепатит D вирус (HDV), коронавирус, филовируси (които включват ebola вирус), rubella вирус, морбили вирус, херпес вируси, вирус на бяс, поносни вируси.

**Тестови съгласно стандартите:** EN 14885, EN 14476, EN 14348, EN 13727, EN 13624.

**Състав:** вода, парфюм, линалоол, лимонен.

**Опасно:** H228: Запалимо тънько вещество. H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите. H412: Вреден за водните организми, с дълготрайен ефект.

P210: Да се пази от топлината/сърти/открит пламък/нагорещи повърхности. Топлонушленето забранено. P403+P233: Да се съхранява на добре проветрено място. Съдът да се съхранява пълно затворен. P280: Използвайте предизвикани ръкавици/предизвикани облекло/предизвикани очила/предизвикани маска за лице. P303+P361+P353: ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Неизбавете свалете цялото замърсано облекло. Обляйте кожата с вода. P235: Да се държи на хладно. P305+P351+P338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изпакването. P370+P378: При покар: Използвайте устройство на алкохол пияна или възпледен диоксид, за да загасите.

Testovani sъгласно стандартите: EN 14885, EN 14476, EN 14348, EN 13727, EN 13624.

**Състав:** вода, парфюм, линалоол, лимонен.

**Опасно:** H228: Brandfarligt fast stof. H319: Forårsager alvorlig øjenirritation. H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. P210: Holdes væk fra varme/gnister/åbenild/varme overflader.

Ryning forbudt. P403+P233: Oppbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.P280: Bær beskyttelseshandske/beskyttelsesstof/ejenbeskyttelse ansigtsbeskyttelse. P303+P361+P353: VED KONTAKT MED HUDEN (eller hæret): Tilsmudsset tegtages straks affjernes. Skyl huden med vand. P235: Oppbevares klogt. P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJENENE: Skyl forsigtigt med vand i fire minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skyllingen. P370+P378: Ved brand: Anvend alkohol skum eller kultile til brandslukning.

Testovani sъгласно стандартите: EN 14885, EN 14476, EN 14348, EN 13727, EN 13624.

**Състав:** etanol, voda, parfum, linalool, limonen.

**Опасно:** H228: Dørfarligt fast stof. H319:

Povrčoča hudo draženje očí. H412: Škodlivijo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinkami. P210:

Laikytai atokiai nuo šilumos/žiellirų/ atviros liepnios/karšto paviršių. Nerūkyti. P403+P233: Laikytai gerai vėdinamoje vietoje. Talyptkla laikytai sandariai uždaryta. P280: Mūvėti apsaugines pirtštines/dėvėti apsauginius drabužius/haudoti akių (veido) apsaugos priemones. P303+P361+P353: PATEKUS ANT ODOS (arba plauku): nedeliamai nuvilkite/pašalinti virus usiterštutu drabužiu. Odą nuplauti vandeniu. P235: Laikytai vésioje vietoje. P305+P351+P338: PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išsimti kontaktinius lešius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliu galutinai plauti akius. P370+P378: Po požaru: Gašeniu se uporabi proti alkoholiu atsparias putas arba anglies dioksid.

Testovani sъгласно стандартите: EN 14885, EN 14476, EN 14348, EN 13727, EN 13624.

**Състав:** etanol, voda, parfum, linalool, limonen.

**Опасно:** H228: Hořlavá tuhá látka. H319:

Způsobuje vážné podráždění očí. H412: Škodlivý pro vodní organizmy, s dlouhodobými účinky. P210:

Chránit před teplém, horkým povrchem, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obliečejový štít. P403+P233: Skladujte na dobré větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. P303+P361+P353: PRÍ STIKU S KOŽOU (ali lasmi): Takoj siela vsa kontaminiranu oblačku. Kožo izprati z vodo. P235: Hraniti na hladnom. P305+351+338: PRÍ STIKU S ØCÍMI: Previdno izprjate z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljuje z izpiranjem. P370+378: Po požaru: Za gašenje se uporabi proti alkoholu odporna pena ali ogljikov dioksid.

Testovani sъгласно стандартите: EN 14885, EN 14476, EN 14348, EN 13727, EN 13624.

**Състав:** etanol, voda, parfum, linalool, limonen.

**Опасно:** H228: Zapaljiva krutina. H319:

Zapaljuje vodne organizme, s dolgovremnim učinkom. P210:

Cítralne pred teplim, horkym povrchem, jiskrami, otevřenym ohnem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P280: Používajte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obliečejový štít. P403+P233: Skladujte na dobré větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. P303+P361+P353: PRÍ STIKU S KOŽOU (ali lasmi): Takoj siela vsa kontaminiranu oblačku. Kožo izprati z vodo. P235: Hraniti na hladnom. P305+351+338: PRÍ STIKU S ØCÍMI: Previdno izprjate z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljuje z izpiranjem. P370+378: Po požaru: Za gašenje se uporabi proti alkoholu odporna pena ali ogljikov dioksid.

Testovani sъгласно стандартите: EN 14885, EN 14476, EN 14348, EN 13727, EN 13624.

**Състав:** etanol, voda, parfum, linalool, limonen.

**Опасно:** H228: Hořlavá tuhá látka. H319:

Způsobuje vážné podráždění očí. H412: Škodlivý pro vodní organizmy, s dlouhodobými účinky. P210:

Chránit před teplém, horkým povrchem, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obliečejový štít. P403+P233: Skladujte na dobré větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. P303+P361+P353: PRÍ STIKU S KOŽOU (ili kosu): Hitro ukončí/ skinutí svu kontaminovanu oblačku. Isprati kožu vodom. P235: Odřazatli hladnimi. P305+351+338: AKO DOSPE U OCÍ: Paživojte isprati vodom nekolika minut. Ukončit kontaktna sočiva, ukoliko postoji i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. P370+378: U slučaju požara: Za gašenje primijeniti pjenu otpornu na alkohol ili uglijeni dioksid.

Testovani sъгласно стандартите: EN 14885, EN 14476, EN 14348, EN 13727, EN 13624.

**Състав:** etanol, voda, parfum, linalool, limonen.

**Опасно:** H228: Hořlavá tuhá látka. H319:

Způsobuje vážné podráždění očí. H412: Škodlivý pro vodní organizmy, s dlouhodobými účinky. P210:

Chránit před teplém, horkým povrchem, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obliečejový štít. P403+P233: Skladujte na dobré větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. P303+P361+P353: PRÍ STIKU S KOŽOU (ili kosu): Hitro ukončí/ skinutí svu kontaminovanu oblačku. Isprati kožu vodom. P235: Odřazatli hladnimi. P305+351+338: AKO DOSPE U OCÍ: Paživojte isprati vodom nekolika minut. Ukončit kontaktna sočiva, ukoliko postoji i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. P370+378: U slučaju požara: Za gašenje primijeniti pjenu otpornu na alkohol ili uglijeni dioksid.

Testovani sъгласно стандартите: EN 14885, EN 14476, EN 14348, EN 13727, EN 13624.

**Състав:** etanol, voda, parfum, linalool, limonen.

**Опасно:** H228: Hořlavá tuhá látka. H319:

Způsobuje vážné podráždění očí. H412: Škodlivý pro vodní organizmy, s dlouhodobými účinky. P210:

Chránit před teplém, horkým povrchem, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obliečejový štít. P403+P233: Skladujte na dobré větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. P303+P361+P353: PRÍ STIKU S KOŽOU (ili kosu): Hitro ukončí/ skinutí svu kontaminovanu oblačku. Isprati kožu vodom. P235: Odřazatli hladnimi. P305+351+338: AKO DOSPE U OCÍ: Paživojte isprati vodom nekolika minut. Ukončit kontaktna sočiva, ukoliko postoji i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. P370+378: U slučaju požara: Za gašenje primijeniti pjenu otpornu na alkohol ili uglijeni dioksid.

Testovani sъгласно стандартите: EN 14885, EN 14476, EN 14348, EN 13727, EN 13624.

**Състав:** etanol, voda, parfum, linalool, limonen.

**Опасно:** H228: Hořlavá tuhá látka. H319:

Způsobuje vážné podráždění očí. H412: Škodlivý pro vodní organizmy, s dlouhodobými účinky. P210:

Chránit před teplém, horkým povrchem, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obliečejový štít. P403+P233: Skladujte na dobré větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. P303+P361+P353: PRÍ STIKU S KOŽOU (ili kosu): Hitro ukončí/ skinutí svu kontaminovanu oblačku. Isprati kožu vodom. P235: Odřazatli hladnimi. P305+351+338: AKO DOSPE U OCÍ: Paživojte isprati vodom nekolika minut. Ukončit kontaktna sočiva, ukoliko postoji i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. P370+378: U slučaju požara: Za gašenje primijeniti pjenu otpornu na alkohol ili uglijeni dioksid.

Testovani sъгласно стандартите: EN 14885, EN 14476, EN 14348, EN 13727, EN 13624.

**Състав:** etanol, voda, parfum, linalool, limonen.

**Опасно:** H228: Hořlavá tuhá látka. H319:

Způsobuje vážné podráždění očí. H412: Škodlivý pro vodní organizmy, s dlouhodobými účinky. P210:

Chránit před teplém, horkým povrchem, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obliečejový štít. P403+P233: Skladujte na dobré větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. P303+P361+P353: PRÍ STIKU S KOŽOU (ili kosu): Hitro ukončí/ skinutí svu kontaminovanu oblačku. Isprati kožu vodom. P235: Odřazatli hladnimi. P305+351+338: AKO DOSPE U OCÍ: Paživojte isprati vodom nekolika minut. Ukončit kontaktna sočiva, ukoliko postoji i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. P370+378: U slučaju požara: Za gašenje primijeniti pjenu otpornu na alkohol ili uglijeni dioksid.

Testovani sъгласно стандартите: EN 14885, EN 14476, EN 14348, EN 13727, EN 13624.

**Състав:** etanol, voda, parfum, linalool, limonen.

**Опасно:** H228: Hořlavá tuhá látka. H319:

Způsobuje vážné podráždění očí. H412: Škodlivý pro vodní organizmy, s dlouhodobými účinky. P210:

Chránit před teplém, horkým povrchem, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obliečejový štít. P403+P233: Skladujte na dobré větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. P303+P361+P353: PRÍ STIKU S KOŽOU (ili kosu): Hitro ukončí/ skinutí svu kontaminovanu oblačku. Isprati kožu vodom. P235: Odřazatli hladnimi. P305+351+338: AKO DOSPE U OCÍ: Paživojte isprati vodom nekolika minut. Ukončit kontaktna sočiva, ukoliko postoji i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. P370+378: U slučaju požara: Za gašenje prim